

SLIMPAD

FIT

取扱説明書

CL-EP-306

LABO

LIFE STYLE AND BEAUTY ORIGINAL

このたびは、本製品を お買い上げいただき 誠にありがとうございます

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

また本書を読み終わった後は大切に保管してください。本製品は美容を目的としたものであり、治療を目的とした使用もしくは販売は法律上禁じられております。また、健康な身体への使用を前提に考えられた製品ですので、医師等による治療を受けている部位への使用に関するトラブルは一切の責任を負いかねます。

LABO
LIFE STYLE AND BEAUTY ORIGINAL

安全上のご注意	3
その他の注意事項	5
セット内容と各部の名称	6
製品仕様	7
ご使用前の準備	8
ご使用方法	9
本体取り付け位置	11
使用上の注意	12
ゲルパッドのお手入れ方法	13
本体のお手入れ方法と注意事項	14
充電池について	15
保管について	16
トラブルQ&A	17
保証とアフターサービスについて	21
保証書	23

ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、お読みになったあとは必要な時にご覧になれるよう、大切に保管してください。

ここに示した説明事項は、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための内容を記載しておりますので、必ずお読みください。



危険

誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負うおそれが高い内容を示しています。



警告

誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをしたときに、ケガをしたり財産に損害を与えるおそれがある内容を示しています。

■絵表示の意味



この絵表示は、してはいけないこと(禁止)を表しています。



この絵表示は、しなければならないこと(強制)を表しています。



この絵表示は、気をつける必要があることを表しています。

この取扱説明書には、安全にお使いいただくために色々な絵表示で表しています。その表示を無視し、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区別しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

安全上のご注意

危険



本製品内部からもれた液体が目に入ったときは、こすらずきれいな水で洗った後、ただちに医師の診療を受けてください。失明などの原因となります。

警告



ご使用前に、本取扱説明書をお読みください。説明書記載以外の使用についてはかたく禁じます。

身体に何か異常が発生した場合は使用を中止し、医師にご相談ください。

万一、異常な音、におい、煙が出た時や、内部に異物が混入したときは電源をOFFにし、お買い求めの販売店、発売元までご連絡ください。

他の治療機器と同時に使用しないでください。

本機はボディ専用です。絶対に顔・心臓付近には使用しないでください。

刺激により筋肉が動きますので、周囲に危険物がない状態でお使いください。

ゲルパッドの粘着が弱くなりますと刺激が1点に集中する可能性がありますので使用目安の回数以下でお使いください。



本商品を濡れた手で操作しないでください。感電・故障・火災・やけどのおそれがあります。

本体を水につけたり、水を使用してお手入れをしないでください。



異物を内部に入れないでください。



自分で分解、改造、修理をしないでください。

注意



本商品は一般家庭用です。絶対に業務用として使用しないでください。

お子様に使用しないでください。

運転中、睡眠中に使用しないでください。

ご使用になる時は、指輪・腕時計・眼鏡などの金属類、貴金属類のアクセサリ類を身体からはずしてください。

使用中は本体を落とさないようにしてください。故障の原因となります。



本体を絶対に濡らさないでください。お風呂場など、高温多湿の場所やほこりの多い場所で使用・保管しないでください。

 次のような場合は絶対に使用しないでください

 **警告**

- 1) 心臓病を患っている場合。
- 2) 人工心臓などの生命維持用医療電子機器、心電計などの装着型医療電子機器、ペースメーカーなどの体内埋め込み型電子機器を使用している場合。
- 3) 血圧に異常がある場合。
- 4) 高熱がある場合。
- 5) 発熱、急病、重症、皮膚病がある部位、ケロイド体質、高血圧、生理中、妊娠中、手術後、子宮筋腫のあるお腹、極度の疲労、安静が必要な状態の時。
- 6) 事故や病気のため、体内に金属やプラスチック、シリコンなどを埋め込んでいる部位。
- 7) 身体に異常を感じる時は、いかなる場合も使用しないでください。
- 8) 心臓の近く、キズ、ほくろ、静脈、口中、陰部など身体の敏感な場所に使用しないでください。
- 9) アトピー性皮膚炎の人や、アレルギー体質でお肌が敏感な方。
- 10) 急性疾患、有熱性疾患、伝染性疾患、感染性疾患の方。
- 11) 貧血症、糖尿病、血友病、結核性の病気を患っている方。
- 12) ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝臓機能障害で毛細血管拡張を起こしている方。
- 13) 飲酒中。
- 14) 医師の治療を受けている方や薬を服用中の方。
- 15) 皮膚に異常や炎症(化粧品によるかぶれ、炎症、日焼けを含む)、かゆみ、切り傷、出血のおそれ、知覚障害などがある場合。
- 16) 乳房に異常や炎症、傷などがある場合。
- 17) 美容整形や豊胸手術を行っている場合は使用前に医師に相談をしてください。
- 18) 15歳以下の方。
- 19) 悪性腫瘍の方。
- 20) 鎮痛剤、血糖降下剤、血圧降下剤を服用または注射されている方。
- 21) 食事直後の腹部への使用。

※通院中の方は医師にご相談の上、ご使用ください。


※その他、使用に関して心配な方、使用時に身体に異常をきたした方は使用を控えて専門医にご相談ください。

セット内容と各部の名称


本体 × 1

コントローラー

表面

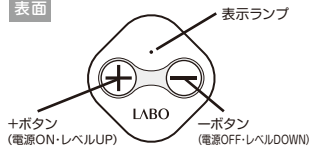


裏面

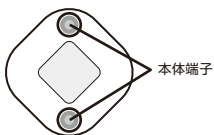


シリコンパッド

表面

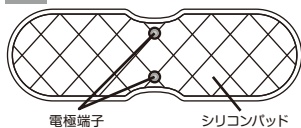


裏面

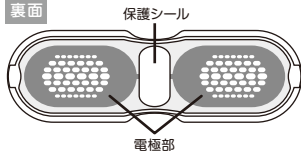


保管用トレイ × 1




USB ケーブル × 1

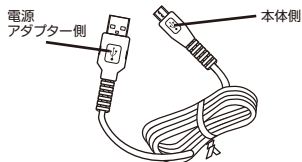

電源アダプター × 1

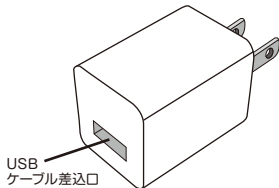

ゲルパッド 2 枚セット × 1

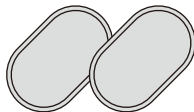

粘着面が弱くなりましたら別売品をお求めください。詳しくはP.13「ゲルパッドのお手入れ方法」を参照してください。


製品仕様

商品名	スリムパッド フィット
種別	家庭用EMS運動機器
型番	CL-EP-306
本体サイズ	W約242mm × D約76mm × H約17mm
本体重量	約55g(ゲルパッド未装着時)
電源方式	リチウムイオン充電電池内蔵(DC3.7V 115mAh)
消費電流	60mA(最大値)
充電時間	約2.5時間
材質	【コントローラー】ABS樹脂、シリコン 【シリコンパッド】シリコン、PET(導電性銀インク) 【ゲルパッド】ハイドロゲル 【保管用トレイ】紙、PP
セット内容	本体(コントローラー、シリコンパッド)×1、ゲルパッド2枚セット×1、保管用トレイ×1、USBケーブル×1、電源アダプター×1、取扱説明書(保証書付)

■電源アダプター

電源	AC100V-240V 50/60Hz
出力電圧/電流	DC5V / 500mA
ケーブルの長さ	約50cm

ご使用前の準備

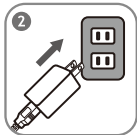

充電する

1) 本体側面のカバーを開け、コントローラーと電源アダプターにUSBケーブルを差し込む。※差し込む向きに注意してください。

2) 電源アダプターを家庭用コンセントに差し込む。

※充電中はボタン操作できません。ご使用の際は、必ずUSBケーブルをコントローラーから抜いてご使用ください。

※他社製の電源アダプターの使用は避けてください。


充電中:赤ランプ点灯(充電容量に対しフル充電に近い状態で充電を開始した場合、安全仕様のため表示ランプは点灯しません)

充電完了:ランプ消灯

※フル充電されるまでの時間は約2.5時間です。

※1回のフル充電で約14回使用できます(使用環境・条件によって、使用回数は変わります)

ゲルパッドを貼り付ける

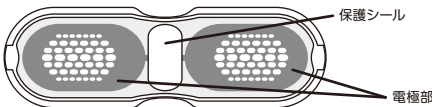

注意 裏面の中央にある保護シールははがさないでください。はがしてある形跡が見られた場合、保証の対象外となります。また、はがした事により起きたトラブルも一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

1) はじめに切れ込みのある面のフィルムをはがしてください。

2) ゲルパッドを2枚ともグレーの電極部分に空気が入らないように装着します。

※ゲルパッド同士が重ならないように貼り付けてください。

※ゲルパッドは必ず電極部がすべて隠れるようにしっかりと貼り付けてください。

※ゲルパッドが正しく貼り付いていないと、肌に負荷がかかり刺激が強くなる場合がありますので、ご注意ください。

3) 透明フィルムの上から指の腹で空気を抜くようにしっかりと貼り付けます。

※ゲルパッドを貼り付ける際は縁の部分を押しながらぞり、本体側にしっかりと貼り付けてください。

※ゲルパッドを本体にしっかりと貼り付けていないと、本体からはがれやすくなりますので、ご注意ください。


4) 最後に残った透明フィルムを両端からゆっくりはがし、準備完了です。

※ゲルパッドは新品と交換する時までにはがさないでください。

間違った貼り付け方で使用すると粘着力が弱くなり
使用目安より早く消耗する可能性があります。

ご使用方法


1) コントローラーをシリコンパッドにセットする

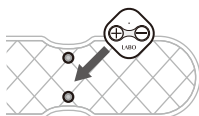

正



誤

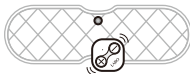


- ※コントローラーがシリコンパッドに装着していない状態で、ボタン操作はしないでください。
- ※コントローラーの本体端子とシリコンパッドの電極端子をしっかりと装着してください。

2) 本体を身体に貼り付ける

P.11「本体取り付け位置」を参考にトリートメントしたい部分に本体を貼り付けます。


3) 電源を入れる

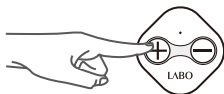

「+ボタン」を2秒間長押しすると「ビー」という音になり、緑色ランプが1秒点灯し、電源が入ります。

- ※ゲルパッドが肌に着していないと「ビッピッ」と警告音が鳴り動作しません。
- ※電源を入れただけではレベル0のままなので刺激はありません。

4) レベルを調整する

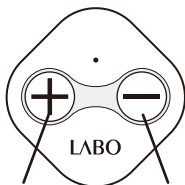

強さを
上げる

強さを
下げる

最大レベル15段階

最大・最低レベルに達すると「ビッピッ」という連続音が鳴ります

「+ボタン」を押し、刺激の強さを選びます。この時「ビッ」と音が鳴り、緑色ランプが1回点滅します。強さを下げたい時は、「-ボタン」を押します。お好みの強さでトリートメントを開始してください。20分後に自動的に電源が切れます。

レベル調整は1段階ずつ、ゆっくりボタンを押してください。

途中で電源を切る場合は「-ボタン」を2秒間長押しすると「ビー」という音になり電源が切れます。


電池の残量が少なくなると赤ランプが点滅し、「ビッピッ」という音がなります。充電してください。

※ランプが点灯しなくなったり、「ビー」という音がしなくなったり、電気刺激が感じなくなったら、電池残量が少なくなっている可能性があるので充電してください。

※電源が入っている状態でゲルパッドがお肌に密着していない場合、「ビッピッ」と警告音が鳴り、レベルが0になります。さらに1分後に自動で電源が切れます。

ご使用方法

5) 終了する

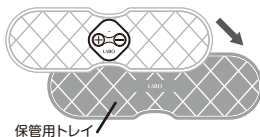

開始してから20分で自動的に電源が切れます。終了後はお肌から垂直方向に両端からゆっくりはがしてください。本体やジェルパッドは、P.14「本体のお手入れ方法と注意事項」を参照にお手入れを行い、保管用トレイに貼り付けて保管して下さい。

⚠ 注意

保管時は無理に折り曲げたり、ひっぱったりしないでください。

※はがし方を間違えた場合、ジェルパッドが本体からはがれてしまう恐れがあります。

※保管用トレイは別売しておりません。大切に保管してください。

6) モード自動切替


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12モード自動切替


効率的に運動するための12のモードが20分の間、自動的に切り替わりトレーニングを行います。

※モードによって周波数が異なりますので、感じる刺激の強さが一定ではありません。初めてお使いになる方や久しぶりに使う方は弱いレベルからご使用ください。慣れましたら、徐々に出力を上げてください。


本体取り付け位置

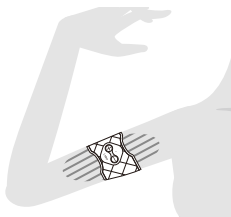


二の腕

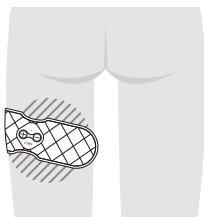

太もも

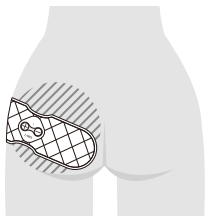

お尻

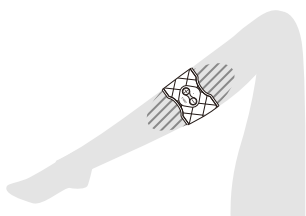

ふくらはぎ

※同一箇所には1時間の休憩をはさんで、1日2回までの使用にとどめてください。

※本体が肌に適切についている時のみ作動します。
※本体が肌に触れていない時は電気刺激は起こりません。

おすすめトリートメント方法

効率よくケアを行う4つのポイント

- 1) 週に1～2回は休んでください。
- 2) 日々の最大出力を記録していき、徐々に最大レベルを上げていってください。
- 3) より強い出力レベルは良い結果につながる可能性もありますが、不快なほど過度な刺激は避けてください。
- 4) 自動的に電源が切れるまで(20分間)、トレーニングを行ってください。

使用上の注意

⚠️ 必ず守ること

- ・20分以上の連続使用はしないでください。
- ・同一箇所には1時間の休憩をはさんで、1日2回までの使用にとどめてください。
- ・本体を長時間身体につけたままにしないでください。

使用上の注意


- 身体や肌に異常を感じた場合、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。事故や体調不良の原因となります。
- むやみに強くしたり、長時間使用しても効果が上がるわけではありません。筋肉疲労や、皮膚のヒリヒリ感ややけどの原因となる事があります。
- 使用前にネックレスなどの貴金属のアクセサリー類を身体から外してください。急激な刺激の原因となります。
- トリートメントの際は、ボディクリーム、乳液、オイルなどを使用しないでください。
- ご使用箇所の体毛は処理されていた方が、ゲルパッドがより良くお肌に密着します。
- 使用する際に本体を無理に引っ張らないでください。
- ボタンを強く押しすぎないでください。

ゲルパッドのお手入れ方法



注意

電源がオフになっていることを確認してからおこなってください。電源が入った状態でお手入れすると、刺激等を受ける場合がございます。

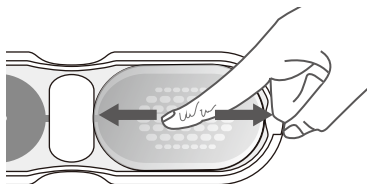

ゲルパッドの粘着面が汚れて貼り付きにくくなったら、指の先に水滴をつけ、粘着面を軽くなできるようにして汚れをとります。表面の水気がなくなるまで自然乾燥させてください。

本体は絶対に濡らさない

つめやブラシで擦らない

洗剤などで洗わない

水中につけない

もみ洗い、つけ置きはしない

■ゲルパッド面同士を貼付けしないでください。

■使用後は本体のゲルパッド面に保管用トレイを貼り付けて保管してください。

■直射日光が当たらず、風通しの良い涼しい場所に保管してください。


※ゲルパッドは消耗品です。使用目安は約20回です。粘着面が痛んだ時は、別売品をお求めください。
純正品以外のゲルパッドを使用すると、以下のトラブルが発生するおそれがあります。

- 製品本来の性能を発揮できない
- 製品の一部が破損し、故障する
- 刺激を強く感じたり、やけどや肌荒れを起こす


純正品以外を使用して発生したトラブルについては保証対象外とさせていただきます。
一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。純正品のゲルパッドのご購入に関しては、お買い上げの販売店、または当社までお問い合わせください。

本体のお手入れ方法と注意事項

⚠ 注意 電源がオフになっていることを確認してからおこなってください。電源が入った状態でお手入れすると、刺激等を受ける場合がございます。

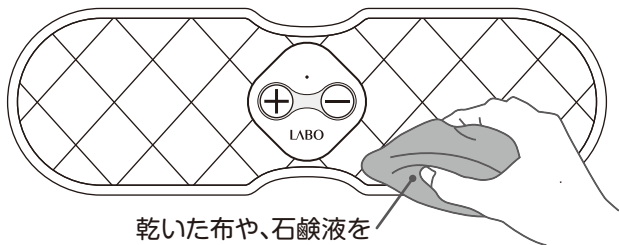

乾いた布や、石鹼液を
少し含ませた布

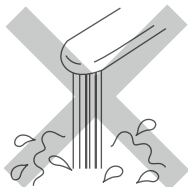

本体のお手入れに水を使用しないでください。

本体の汚れはシンナー、ベンジン、アルコール、除光液などで拭かないこと。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。乾いた布や、石鹼液を少し含ませた布で拭き取ってください。

充電電池について

- 約2.5時間でフル充電されます。充電までの時間が極端に長い、もしくは短くなった場合や、フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。
※使用・保管などの状態により大きく変化します。
- 充電推奨温度は5～35℃です。周囲温度が適正温度(5～35℃)から極端にはずれていると、充電時間がのびたり、充電しない場合があります。
- 特に低温での充電は充電電池の寿命を短くするおそれがあるため、充電推奨温度での充電をおすすめします。
- 使いはじめ(購入直後や3ヶ月以上放置したとき)や使用中に動作が停止したときは、必ずフル充電してからお使いください。

※リチウム電池の特性として、長時間放置されますと充電電池の寿命が短くなります。
1ヶ月に1回は2時間以上補充電をしてください。

電池の交換・破棄について

⚠ 注意 お客様ご自身で充電電池の取り外し、交換は絶対に行わないでください。

内蔵充電電池の交換は本体を分解する必要があるため、専門の知識が必要です。お客様ご自身で交換はできません。電池交換、破棄に際しては、当社までご相談ください。ご自分で分解や交換等を行うと操作機能や動作が正常に維持できず、故障の原因となります。

保管について

本品は次のような場所に保管してください



水平で安定した場所



風通しの良い場所

気温 5~35度
湿度 20~80%

上記の気温と湿度の場所

本品は次のような場所に保管しないでください

本機器は精密な機械・電子部品で作られています。

次のような場所に保管すると動作不良の原因となりますので、絶対に避けてください。



直射日光の当たる場所



ホコリやチリの多い場所



温度変化の激しい場所



湿度変化の激しい場所



火気のある場所



水に濡れやすい場所



揮発性物質のある場所




冷暖房機器に近い場所



振動のある場所

 **注意**

乳幼児や自分で意思表示できない人へ使用したり、手の届く場所に置かないでください。事故や体調不良の原因となります。

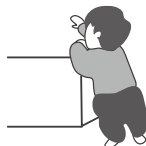

トラブルQ&A

質問	対処方法
電源が入らない	電池の残量が無くなっている可能性があります。 充電を行い、再度お試しください。
	「+ボタン」を長押ししているか確認してください。 「-ボタン」を誤って押していないか確認してください。
	「+ボタン」を長押しすると「ピー」という音が鳴り電源が入ります。 耳で電源が入るかどうか再度確認してください。
警告音が止まらない 出力が上がらない 動かなくなった	本製品専用のジェルパッドを使用しているかご確認ください。
	20分動作した後に自動で電源が切れます。
	「-ボタン」を2秒間長押しして電源を落とし、再度「+ボタン」を2秒間長押しして電源を入れ直し、再度お試しください。
	すべてのジェルパッドが肌に密着しているかご確認ください。 肌に密着していないと「ビッピッ」と警告音が鳴り続けます。
通電を感じない トリートメント機能が 感じられない	コントローラーをしっかりと装着して、再度電源を入れてお試しください。
	本製品専用のジェルパッドを使用しているかご確認ください。
	ジェルパッドから透明フィルムを剥がしているか確認してください。 ⇒ジェルパッドを本体に貼り付ける際、最後に透明フィルムを剥がさなければ肌につきません。
	ジェルパッドが本体についているか確認してください。
	すべてのジェルパッドが肌に密着しているか確認してください。 肌に密着していないと「ビッピッ」と警告音が鳴り続けます。
	ジェルパッドが消耗している可能性があります。ジェルパッドを交換して再度お試しください。
	電池が消耗している可能性があります。充電を行い再度お試しください。
	出力レベル設定が低い可能性があります。「+ボタン」を押してレベルを上げてください。 電源を入れた直後は出力レベルが0のため、出力を上げなければトリートメント機能を感じません。
	皮膚が極度に乾燥していると通電しないことがあります。 皮膚を水で濡らせてから再度お試しください。

トラブルQ&A

質問	対処方法
途中で電源が落ちてしまう	コントローラーをしっかりと装着して、再度電源を入れてお試しください。
	電池の残量が無くなっている可能性があります。 充電を行い、再度お試しください。
	無理な体勢で使用している可能性があります。本体に負担がかかった場合、電池ケース部分に負担がかかり電源が落ちてしまったり、コントローラーが外れてしまう可能性も考えられます。
電気刺激が弱い	電池の残量が少なくなっている可能性があります。充電を行い再度お試しください。
	出力レベル設定が低い可能性があります。「+ボタン」を押してレベルを上げてください。
	本製品専用のジェルパッドを使用しているかご確認ください。
	ジェルパッドが消耗している可能性があります。ジェルパッドを交換して再度お試しください。
電気刺激が強い 刺激が痛く感じる	出力レベル設定が高い可能性がございます。「-ボタン」を押してレベルを下げてください。
	ジェルパッドが消耗している可能性があります。ジェルパッドを交換して再度お試しください。
	同一箇所には1時間の休憩をはさんで、1日2回までの使用にとどめてください。
	ジェルパッドが肌に密着していない可能性があります。ジェルパッドと肌の間に隙間がないように貼り付けてください。
	無理な体勢で使用している可能性があります。ジェルパッドが肌にしっかりと密着する体勢で行ってください。
	本製品専用のジェルパッドを使用しているかご確認ください。
出力レベルが上がらない	ボタンの操作ミスの可能性があります。「+ボタン」を押しているか再度ご確認ください。
	電池の残量が少なくなっている可能性があります。 充電を行い再度お試しください。
	コントローラーがしっかりと装着できているかご確認ください。
充電中に表示ランプが点灯しない	安全にご使用いただけるようフル充電に近い状態で充電を開始した場合、赤ランプは点灯しない仕様となっております。充電途中にUSBケーブルを抜いた際、その時点で充電容量がフル充電に近い状態まで充電されていた場合、再度USBケーブルを差して充電を開始しても、表示ランプは赤色に点灯しません。充電容量が足りていない場合は、表示ランプが点灯して充電が開始されます。

トラブルQ&A

質問	対処方法
ゲルパッドが電極部からはがれてしまう	本体にしっかりとゲルパッドがついていない可能性があります。電極部分にゲルパッドを貼りつけた後は透明フィルムの上から指の腹で空気を抜くようにして本体にしっかりと貼り付けてください。
ゲルパッドの寿命はどれくらいですか？	使用状況にもよりますが、1日1回(20分)の使用で約20回が目安となります。ただし、使用部位・時間や個人差(毛深さ・皮脂の多さ等)がありますので、粘着力が弱くなってきたと感じたら交換して下さい。粘着力が低下すると、筋肉へ効率よく電気が伝えられず、ビリビリ感が強くなります。
充電しても使用可能時間が極端に短くなった	充電時間が充分でない可能性がございます。 フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は電池寿命と考えられます。
ゲルパッドの粘着性が弱まり身体に付かなくなった	指先に水滴をつけ、粘着面を軽くなるようにして掃除してください。 必ず保管用トレイに貼り付けて保管してください。保管用トレイに貼り付けなければ粘着性が極端に弱まります。 ゲルパッドを交換してください。
ゲルパッドのメンテナンス方法はありますか？	P.13「ゲルパッドのお手入れ方法」を参照してください。
ゲルパッドがべたべたする	ゲルパッドは粘着性、吸水性、膨潤性、弾力性、導電性に優れ、皮膚への刺激が少なくEMSの電気刺激を最大限に筋肉に伝える事ができる医療現場でも使用される良質なパッドを使用しています。特殊な素材を使用しているため、質感がべたべたに感じてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、また、複数の電極を一体型にしている構造のため、本体を支えるために粘着力を高くしておりますので質感がべたついて感じてしまう可能性もありますが、製品の欠陥ではございません。
電極部(銀色箇所)の周囲が茶色や黒っぽく変色してきた	電極材質の変色によるもので機能や使用上に問題はございません。使用回数や使用状況により、電極部が黒く変色することがあります。カビや汚れのような不衛生なものではなく、本製品の性質を劣化させるものではありません。
毎日使用しても問題はありますか？	問題はございません。ただし、同一箇所への使用は1日2回までにしてください。同じ箇所への連続使用は避け、必ず60分は休憩を取ってください。筋肉疲労を考慮して、過度なトレーニングは控えて下さい。

トラブルQ&A

質問	対処方法
浴室で使用できますか？	本体は防水仕様ではありませんので、浴室での使用は故障の原因となりますのでお控えください。
トリートメントを行なった箇所が赤くなった	直ちにトリートメントを止め、肌が正常な状態に戻るまで使用を控えてください。炎症がひかない場合は医師に相談してください。
使用できない部位はありますか？	首から上の部位(頭、顔など)、背骨(脊髄)、頭部および肩甲骨などの心臓周辺部位には使用しないでください。また心臓に疾患がある場合は使用しないでください。
妊娠中や出産直後は使用できますか？	使用しないでください。産後、授乳中の方は、かかりつけの医師にご相談ください。
睡眠中に使用できますか？	睡眠中は使用しないでください。
家族で使用する場合、感染症などの衛生面は大丈夫ですか？	複数の方が使用した場合の衛生面を保障しておりません。

保証書について

保証書は取扱説明書の最後のページについておりますので必ず「販売店・お買上げ日」等の記入をご確認の上、内容を良くお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買上げ日より1年とします。この保証は本体・電源アダプターにのみ適応し、USBケーブル・保管用トレイ・ゲルパッドなどの消耗品には適応されません。

修理を依頼される前に

修理を依頼される前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、再度ご点検の上、なお異常がある場合はお買上げの販売店もしくは当社へご相談ください。

故障した場合の連絡について

お買上げの販売店もしくは当社へご連絡いただき、修理をご依頼ください。

保証期間経過後の修理について

お買上げの販売店もしくは当社へご相談ください。修理・交換によって商品の機能が維持できる場合はご希望により有料修理、または有償にて代替交換対応とさせていただきます。

保証部分の最低保有期間について

本製品の補修用部品については、最低3年間を目安に保管しておりますので、原則として本製品の修理可能期間は3年間となります。なお、期間経過後であっても修理可能な場合もありますので、お買上げの販売店もしくは当社へお問い合わせください。

修理をお受けになる場合の注意

お買上げの販売店および当社へ修理を依頼された場合、修理代が1万円以内の場合は、自動的に通常通り修理を行います。なお、修理代が1万円を超える場合には、修理を依頼された販売店またはお客様にご連絡し、了解を得た後修理いたします。

1. 取扱説明書の注意書きにしたがって使用した状態で保証期間内に故障した場合には無償修理とさせていただきます。無償修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店もしくは当社へ商品と本誌をご提示いただきお申し付けください。

2. 保証期間内でも次の場合には原則として有料になります。

- ・正規品以外のゲルパッドを使用した場合
- ・取扱説明書以外の使用上の誤りに起因する故障および損傷
- ・不当な修理や改造による故障や損傷
- ・お買い上げ後の保管場所・輸送・落下などによる故障および損傷
- ・一般家庭以外(例えば業務用)に使用された場合の故障および損傷
- ・保証書のご提示がない場合
- ・保証書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合(通信販売にてお買い上げのお客様はお届け伝票をご提示ください)
- ・車両・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷
- ・火災・地震・水害・落雷・その他天変地異・異常電圧・指定外の使用電源(電圧・周波数)など
- ・当社以外で誤った修理をしたり、改造したために生じた故障および損傷

3. 本保証書は、日本国内のみ有効です。

4. 本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を宣言するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な点は、お買い上げの販売店もしくは当社へお問い合わせください。

保証期間経過後の修理や、補修部品の保管期間については、取扱説明書の「保証とアフターサービスについて」をご覧ください。

お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無償修理対応及びその他の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

保証書

本書は、本書の記載内容で保証期間内に無償交換を行う事をお約束するものです。お買い上げ日から、下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、販売店もしくは当社へ交換を依頼してください。

商品名	スリムパッド フィット
品番	CL-EP-306
保証期間	お買い上げ日から 1年間
製造番号	
※お買上日	年 月 日
※お客様	ご住所 [〒]
	お名前 様
	電話() -
※販売店	販売店名・住所
	電話() -

※販売店様へ ※印欄は必ず記入してお客様にお渡しください。

故障の内容をできるだけ詳しくご記入ください

製造発売元：クルールラボ株式会社 TEL: 03-5550-7181

修理・サポート：関東テクニカルセンター：

〒260-0033 千葉県千葉市中央区春日 2-12-1

03TK-170704